


Sointu-laite (Crdl®)

lisätietoa laitteesta www.crdl.com

Käsittely

- varo kastelemasta Sointua
- älä pudota sitä tai käsittele liian rajusti
- pidä Sointu pois suorasta auringonpaisteesta tai muusta lämmön lähteestä
- muut sähkölaitteet (televisio, radio yms.) voivat haitata käyttöä
- pyyhi Sointu pehmeällä, kuivalla tai vähän kostutetulla liinalla
- säilytä Sointu omassa kuljetuslaukussaan, silloin kun et käytä sitä

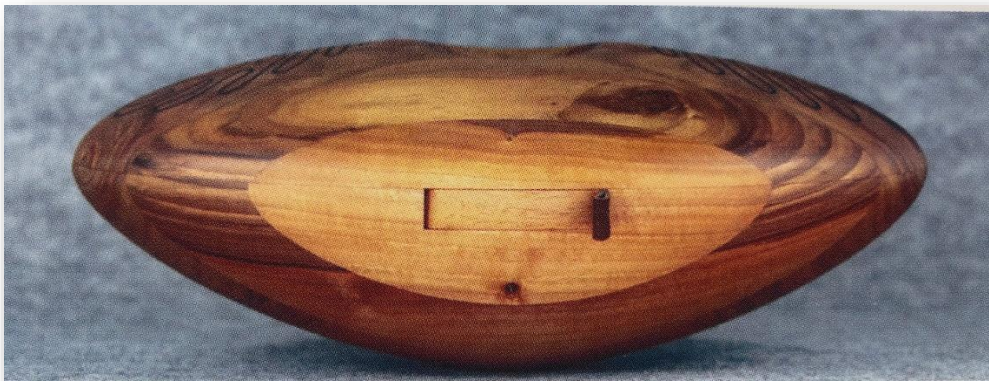


Mikä Sointu (Crdl) on?

Sointu on vuorovaikutteinen instrumentti, joka muuntaa käyttäjien kosketuksen ääneksi. Se on tarkoitettu ihmisille, jotka tarvitsevat tukea kommunikoinnissaan tai vuorovaikutuksessaan toisten ihmisten kanssa – käytettäväksi yhdessä heidän kommunikointikumppaneidensa kanssa. Sointu houkuttelee leikilliseen yhdessäoloon ja lähestymään toista koskettamalla.


Miten Sointu (Crdl) toimii?

1. Molemmat käyttäjät asettavat kätensä laitteen vastakkaisille kosketusalustoille.
2. Samalla toinen koskettaa toista (**paljaalle iholle**)
3. Sointu tunnistaa erilaisia kosketuksen tapoja ja muuntaa kosketuksen erilaisiksi ääniksi.

Kosketuspiiriin voi liittyä tällä tavoin ketjuttamalla useita ihmisiä.

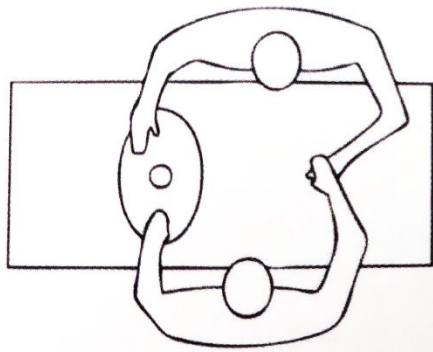

Kuva 1. Suljettu kosketuspiiri (2 ihmistä)

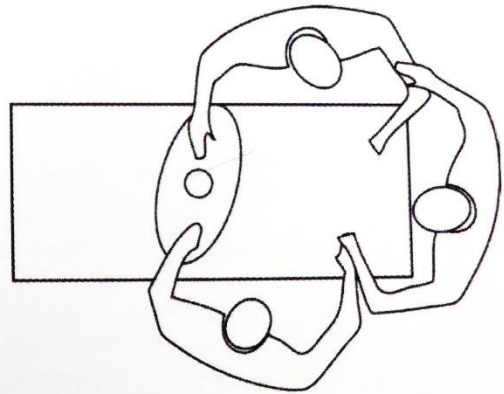

Kuva 2. Suljettu kosketuspiiri (2+ ihmistä)

Erilaisia tapoja koskettaa



tapping



holding



stroking



tickling



kneading

Kuva 3a. Erilaisia tapoja koskettaa: naputus (tapping), kiinni pitäminen (holding), sively (stroking), kutitus (tickling), nipistys (kneading)


Erilaiset kosketukset tuottavat erilaisia ääniä. Mikäli iho on erittäin kuiva, voit kosteuttaa sitä kevyesti kosteusvoiteella ennen laitteen käyttöä.



Kuva 3b. Kosketuspiiri muodostuu, kun molemmat käyttäjät asettavat kätensä vastakkaisille kosketusalustoille ja koskettavat toinen toisiaan.

Sointu (Crdl) -laitteen painikkeet

Painikkeet löytyvät puisen luukun takaa.

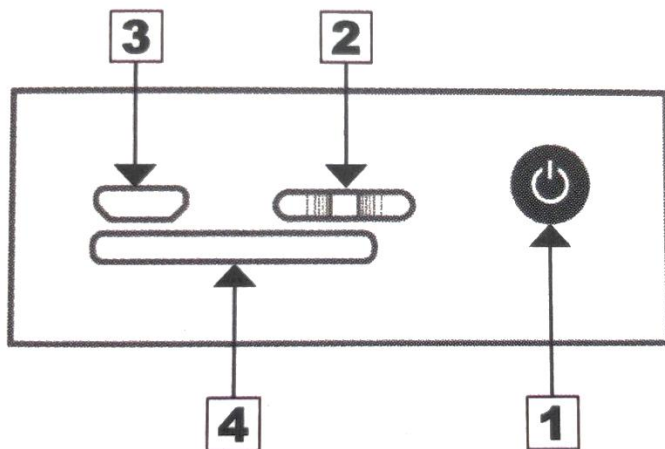

1. Virta PÄÄLLE/POIS
2. Äänen voimakkuus / Äänivalikko
3. Magneetilla toimiva micro-USB -portti
4. SD-kortti (muistikortti)

1. Virta päälle / pois

- paina painiketta 1, kunnes vihreä valo syttyy
- Sointu käynnistyy noin 20 sekunnissa, kuulet kolmisointuisen sävelen, kun laite on valmiina käyttöön
- sulje luukku ja käytä laitetta
- lopeta laitteen käyttö painamalla uudestaan painiketta 1, kunnes kuulet kolmisointuisen sävelen
- led-valo sammuu merkiksi siitä, että virta on pois

2. Äänen voimakkuuden säätö / äänivalikko

- käännä painike 2 vasemmalle: hiljaisempi ääni
- käännä painike 2 oikealle: voimakkaampi ääni
- kun haluat vaihtaa äänimaisemaa, paina kerran painiketta 2 (kun painat uudestaan, saat aina uuden äänimaiseman)

3. Laitteen lataus

- laite tulee ladata, kun punainen valo syttyy
- aseta magneetilla toimiva micro-USB -piuha latausporttiin 3 (varmistu että laite on sammutettuna)
- latauspiuha on oikein päin, kun magneetti napsahtaa tiukasti kiinni
- **HUOM! magneetti micro-USB-piuha voidaan asettaa vain yhdessä asennossa – älä käytä ylimääräistä voimaa asettamiseen!**
- lataus kestää noin 4 tuntia

Sointu (Crdl) -laitteen äänimaisemat

Laitteessa on ohjelmoituna erilaisia äänimaisemia. Jokainen äänimaisema sisältää 5 ääntä. Äänimaisemien teemat ovat:

1. Luonnon äänet: kuten meri, loksien kirkuna, veden virtaus jne.
2. Kaupungin äänet: kuten polkupyörän kello, höyryjuna, kirkon kello jne.
3. Maatilan äänet: kuten kanat, kissa, ankat jne.
4. Soittimien äänet: kuten piano, sello, kitara jne.
5. Ääniavaruus: unenomainen, vedenalainen äänimaisema

Neljä ensimmäistä äänimaisemaa on ladattuna laitteeseen, loput on tallennettu muistikortille.

Muistikortille on mahdollista ladata wav. -muotoisia ja alla olevan esimerkin mukaan nimettyjä tiedostoja.

www.crdl.com -sivuilta löydät lisää tietoa omien äänien lataamisesta

- ambience.wav
- firstcontact.wav
- holding.wav
- knead.wav
- stroking.wav tapping.wav

Sointu (Crdl) -laitteen käyttöideoita

Soinnun avulla voit löytää uudenlaisia kontaktin luomisen tapoja. Seuraavat suositukset voivat olla hyödyllisiä, kun otat Sointua käyttöön.

1. Kokeile käyttää Sointua jo olemassa olevissa toiminnoissa ja osana päivittäisiä rutiineja.
2. Tarjoa Sointua myös yhteisössäsä vierailevien omaisten ja läheisten käyttöön.
3. Pidä Sointu esillä niin, että kaikki käyttäjät saavat sen helposti käyttöönsä. Soinnun voi laittaa pöydälle tai käyttäjän syliin.
4. Tutustu ja kokeile Sointua uteliaasti, ilman että etukäteen päätät, mihin tilanne johtaa. Muista, että ei ole oikeaa tai väärää tapaa käyttää laitetta.
5. Havainnoi, miten käyttäjät reagoivat sekä kosketukseen että ääneen ja mukauta toimintaasi tilanteen mukaan. Muista spontaanius ja leikkisyys!

Lisätietoa

Tikoteekin sivut: www.tikoteekki.fi: käyttöopas ja ohjevideo

Kerron kosketuksella -video Sointu-laitteen käyttökokemuksista toimintakeskuksessa Etevässä: [Kerron kosketuksella – Sointu-laite virittää vuorovaikutukseen - YouTube](#)

Crdl®-laitteen sivut: www.crdl.com