

Lasten SähköSANOMA

(Communicator 5)



tikoteekki

Käyttöopas

Communicator 5

Sisällys

Tervetuloa SähköSANOMAN maailmaan	2
Muistitikun sisältö	2
SähköSANOMAN avaaminen ja sulkeminen	2
Toiminnan pääperiaatteet	3
Huomioitavaa Lasten SähköSANOMAN käytössä	5
Kielipilliset merkit	5
Kielipillisten merkkien käyttö	6
Komentosivu	7
Päivitysten teko	8
Valmiiden sivujen päivittäminen ajotilassa	8
Valmiiden sivujen päivittäminen muokkaustilassa	10
Communicator 5:n muokkaustyökalut	11
Uuden kuvan hakeminen	11
Uuden painikkeen (ruudun) luominen	13
Painikkeen tai painikkeiden koon muokkaaminen	14
Pop up ihmiset-sivun päivittäminen	15
Linkittäminen	15
Valmiin viestin tekeminen tai vaihtaminen	16
Communicator 5:n asetukset	17
Ohjelmien asentaminen	20
Communicator 5	20
DialoQ-taivutin	21
Lasten SähköSANOMA	23

Tervetuloa SähköSANOMAn maailmaan

Lasten SähköSANOMA -taulusto on sähköinen kommunikointikansio. Lasten SähköSANOMA pakettiin kuuluu tauluston lisäksi kommunikointikansio vedenkestävälle paperille tulostettuna. Kansio ja taulusto ovat sisällöllisesti samanlaiset.



Lasten SähköSANOMA on Communicator 5 kommunikointiohjelmalla rakennettu taulusto, joka toimii Windows-käyttöjärjestelmässä eli Windows tietokoneella. SähköSANOMA toimii yhdessä DialoQ taivuttimen kanssa.

Lasten SähköSANOMA on tarkoitettu pienille lapsille, jotka ovat aloittamassa kommunikointiohjelman käytön harjoittelun. Kun tämä sanasto jää liian suppeaksi, on aika vaihtaa johonkin laajempaan kommunikointitaulustoon.

Muistitikun sisältö

- Lasten SähköSANOMA -taulusto tietokoneelle vietäväksi
- kommunikointikansion sivut tulostusta varten
- käyttöopas tulostusta varten

Älä tallenna SähköSANOMA tikulla oleviin tiedostoihin päivityksiä, äläkä poista tikulta tiedostoja!

Kopioi tarvittava kansio (Lasten SähköSANOMA) koneen tiedostoihin ->Communicator 5 -> "käyttäjän nimi" -> minun sivustoni-kansioon ja tallenna tekemäsi päivitykset sinne.


Muistathan ottaa varmuuskopion myös käytössä olevasta päivitetystä versiosta eri muistitikulle.

SähköSANOMA tauluston avaaminen ja sulkeminen

Avaa SähköSANOMA työpöydällä olevasta Communicator 5 -kuvakkeesta, jotta ohjelma avautuu suoraan käyttäjän taulustoon. Tietokone on hyvä sulkea käyttämällä Lasten SähköSANOMAssa olevan komentosivun "Sammuta tietokone" painiketta, jolloin ohjelma sulkee ensin kaikki ohjelmat ja vasta sitten itse koneen.




Toiminnan pääperiaatteet

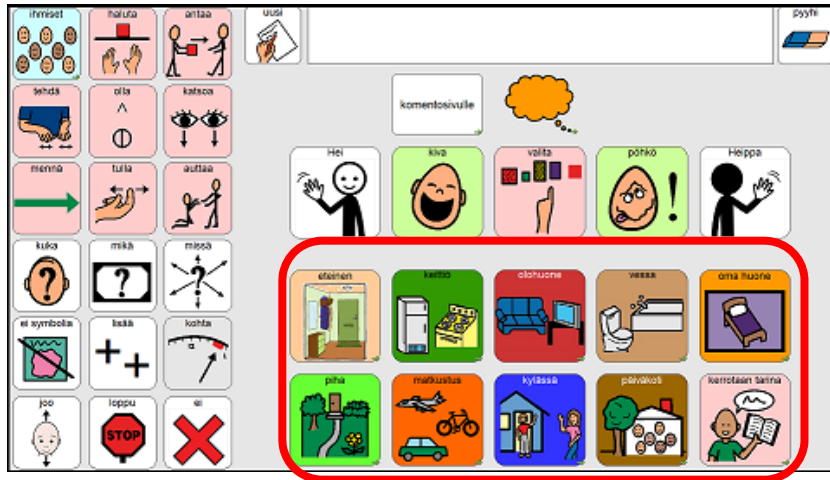

Lasten SähköSANOMASTA löytyy 10 aihepiiriä eli kategoriata kuten kansiosakin.

Jokaisessa aihepiirissä on eri sanaluokkien sanoja. Vasemmassa reunassa olevat yleisimmät sanat toistuvat joka sivulla, mutta keskellä olevat 15 sanaa tai lausetta vaihtuvat eri aihepiirien mukaan.

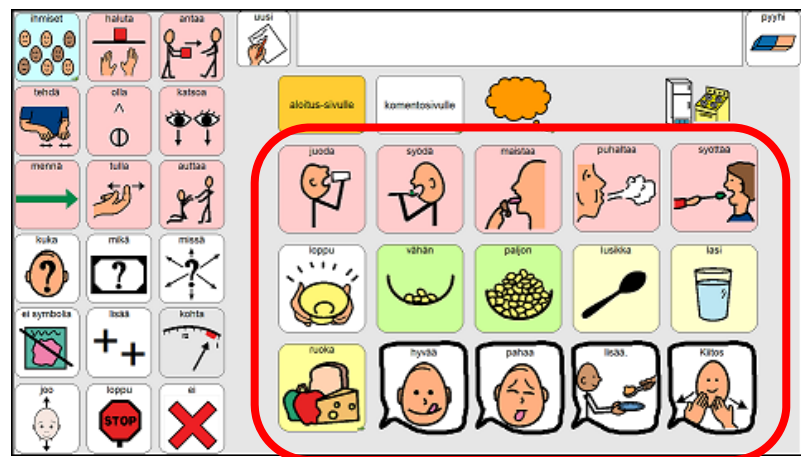

Kuvien taustavärit ovat samat kuin kansiossakin käytetyt: pronomineissa sininen, verbeissä punainen, adjektiiveissa vihreä, substantiiveissa keltainen ja muissa pikkusanoissa harmaa. Lisäksi Lasten SähköSANOMASSA on puhekupla-painikkeita, jotka puhuvat kokonaisen lauseen.




Painikkeet, joista aukeaa ponnahtus- eli popup-sivu, ovat väritykseltään astetta tummempia. Linkkipainikkeessa on lisäksi ruudun oikeassa alakulmassa pieni vihreä nuoli.



Lauseita muodostetaan valitsemalla kuva kerrallaan, jolloin kuvat siirtyvät viestiriville. Kun viestiriviä klikkaa, puhuu ohjelma suomen kielen mukaisesti taivutetun lauseen ääneen.

Minä haluan leikkiä sinun kanssasi

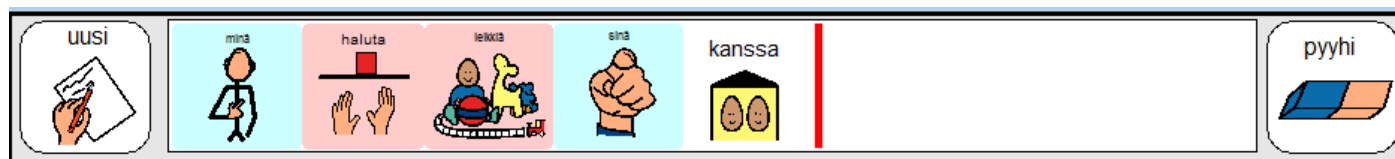

"Uusi"-painikkeesta saa tyhjennettyä viestiriviltä kaiken, kun taas "pyyhi"-painike poistaa viimeisimmän kuvan.

Lausetta rakennettaessa on hyvä ilmaista asiansa mieluummin kahdella tai kolmella lyhyellä lauseella, kuin yhdellä pitkällä lauseella.

Jotta taivutin osaisi taivuttaa ja puhua viestin ääneen oikein on suositeltava lauserakenne:


TEKIJÄ + TEKEMINEN + KOHDE

Huom! Suomenkielen taivutusmuotojen määrästä johtuen taivutin ei valitettavasti aina toimi oikein.

Huomioitavaa Lasten SähköSANOMAN käytössä


Kieliopilliset merkit

Kieliopillisiä merkkejä löytyy ajatuskuplasta avautuvasta ponnahdusikkunasta.

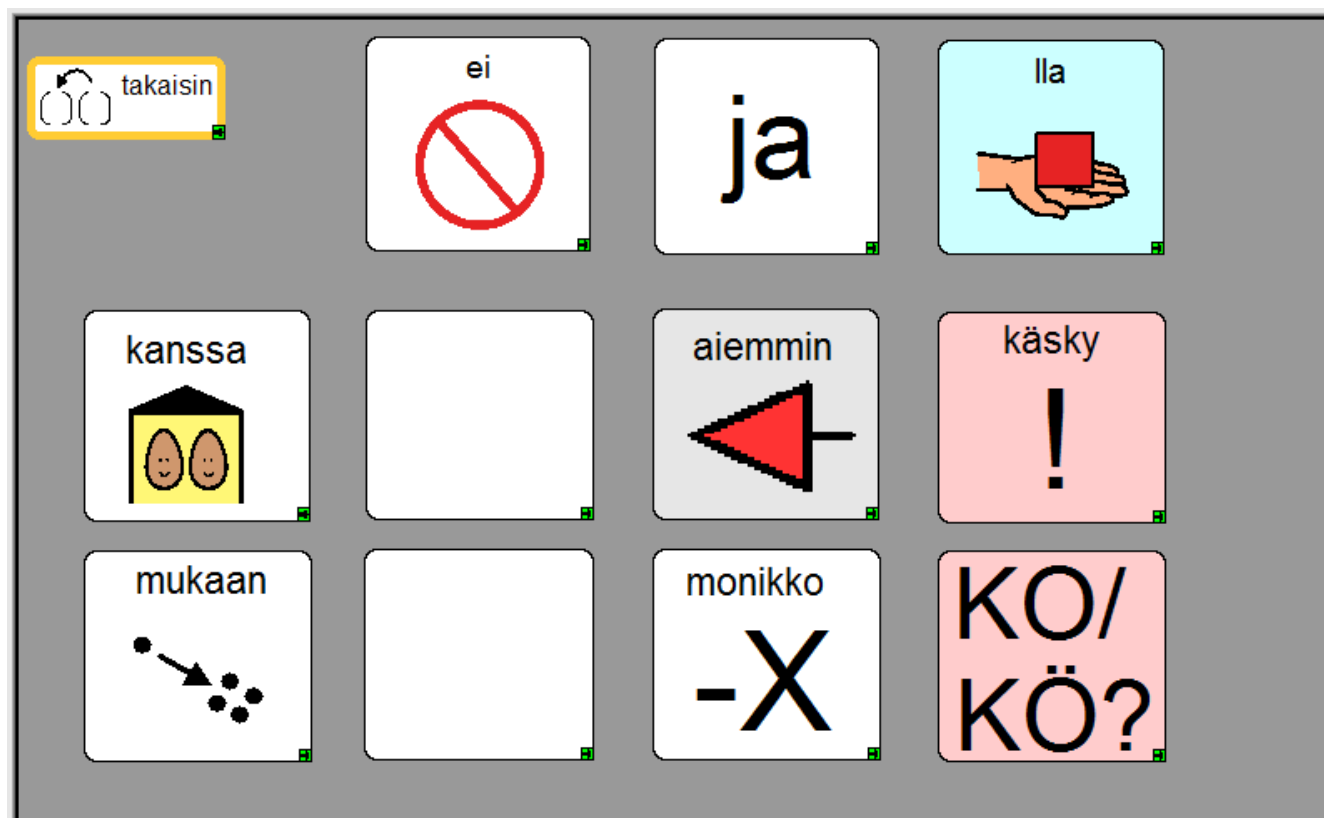

Ponnahdusikkunasta eli pop up -sivusta pääset pois joko valitsemalla jonkin merkin tai klikkaamalla takaisin-painiketta.

Kieliopillisten merkkien käyttö eli taivuttimen ”säännöt”

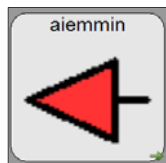

Menneisyys:

Käytä tätä merkkiä pääsanan jälkeen. Esim. ”Minä halusin mennä kauppaan.” (minä, haluta, **aiemmin**, mennä, kauppa)



Monikko:

Käytä tätä merkkiä pääsanan jälkeen. Esim. ”Minä haluan omenoita” (minä, haluta, omena, **monikko**)




Kielteinen ilmaus:

Käytä tätä merkkiä, kun haluat muodostaa kielteisen lauseen. Esim. ”Minä en halua mennä kotiin” (minä, **ei**, haluta, mennä, koti)



Yhdistäminen:

Käytä tätä merkkiä, kun tarvitset ja-sanaa yhdistämään kaksi substantiivia. Esim. ”Minulla on hanska ja sukka.” (minä, lla, olla, hanska, **ja**, sukka) . Tällä merkillä **ei voi** yhdistää kahta verbiä.

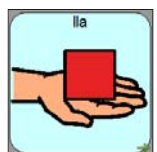

Omistaminen:

Käytä tätä merkkiä elollisten kanssa ilmaistaksesi että jollakin on jotakin. Esim. ”Minulla on kirja” (minä, **lla**, olla, kirja). Tämä merkki lisää lauseeseen omistuksen. Jos taas halutaan sanoa ”Minun kirja”; se muodostetaan merkeillä minä + kirja.



Kysymykset:

Käytä tätä merkkiä verbikysymyksessä. Liitä merkki tekemisen perään. Esim. ”Ajaako äiti kotiin?” (ajaa, **ko**, äiti, koti)




Käskymuoto:

Käytä tätä merkkiä saadaksesi verbistä käskymuoto. Esim. ”Pue haalari!” (pukea, **käsky**, haalari)

Komentosivu

Komentosivu sisältää Lasten SähköSANOMAssa vain tärkeimmät komennot.

Komentosivulle pääset viestirivin alla olevasta painikkeesta

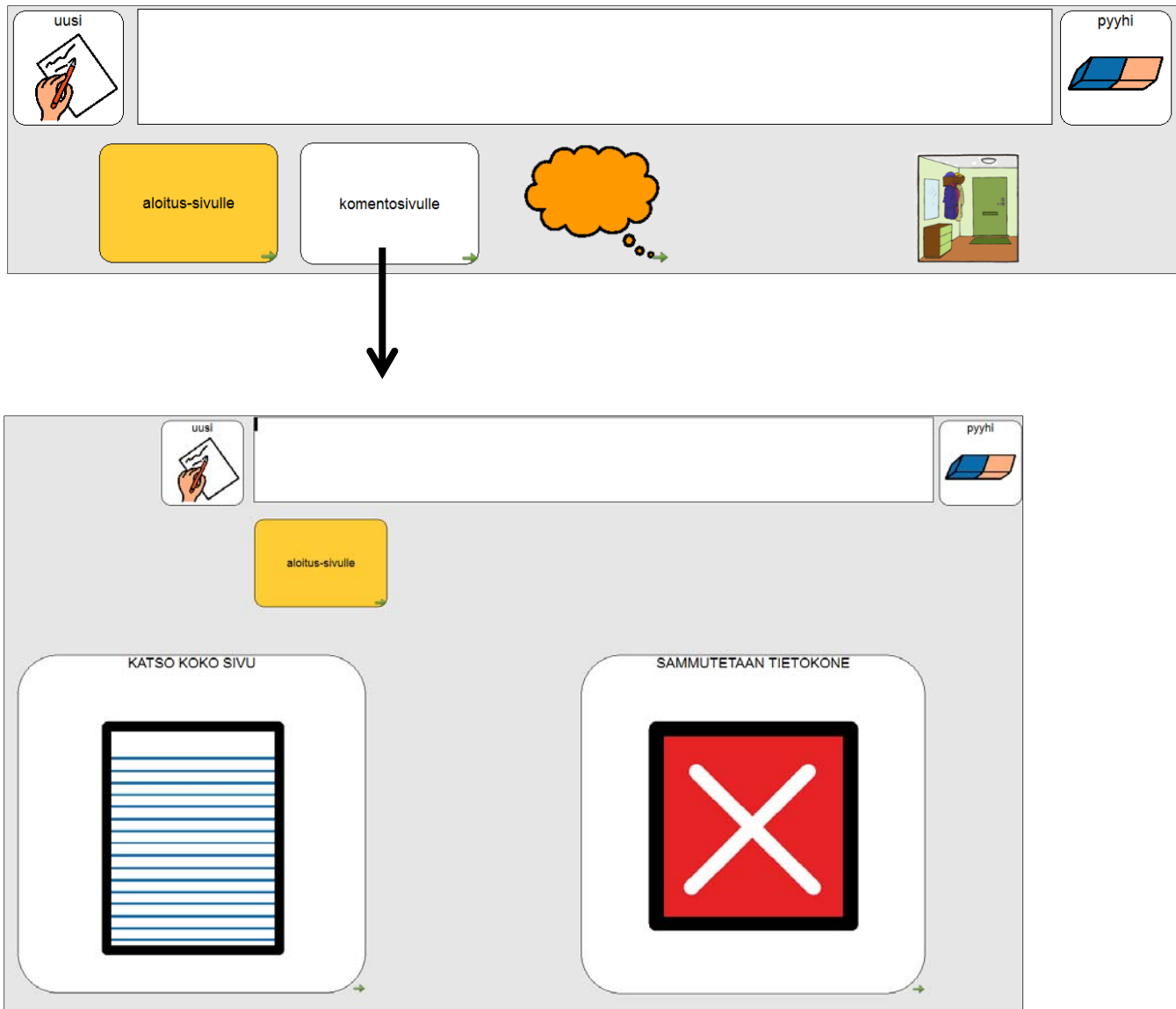

Katso koko sivu- painike avaa koko sivun kokoisen viestirivin, jolloin näet kerralla kokonaan useamman lauseen mittaisen ”tarinasi”

Sammuta tietokone -painike sammuttaa SähköSANOMAN sekä tietokoneen. Tätä painiketta klikattaessa, ohjelma kysyy: ”Haluatko että tietokone sammutetaan?” ja avaa uuden sivun, jossa mahdollisuus palata takaisin aloitussivulle tai vastata kysymykseen **kyllä**, jolloin ohjelma ja tietokone sammutetaan. Jos kysymykseen vastataan **ei**, siirtyy näkymä takaisin komentosivulle.

Päivitysten teko


Tarvittaessa Lasten SähköSANOMAAN tehdään päivityksiä, jotta sivuilta löytyy käyttäjälle tärkeät kuvat ja henkilöiden valokuvat. Communicator-ohjelmalla muutoksia voidaan tehdä sekä ajotilassa että muokkaustilassa. Ajotilassa voidaan tehdä yksittäisiin painikkeisiin muutoksia, mutta laajemmat muutokset tulee tehdä muokkaustilassa.

Valmiiden sivujen päivittäminen ajotilassa

Ajotilassa voidaan tehdä niin sanottuja pikamuokkauksia.



Yksittäisen painikkeen muokkaukseen pääset ajotilassa klikkaamalla hiiren oikea ja valitsemalla **Muokkaa painiketta**, jolloin kaikkien painikkeiden reunat muuttuvat punaisiksi. Valitse nyt haluttu painike klikkaamalla, jolloin avautuu painikkeenmuokkaustyökalu.

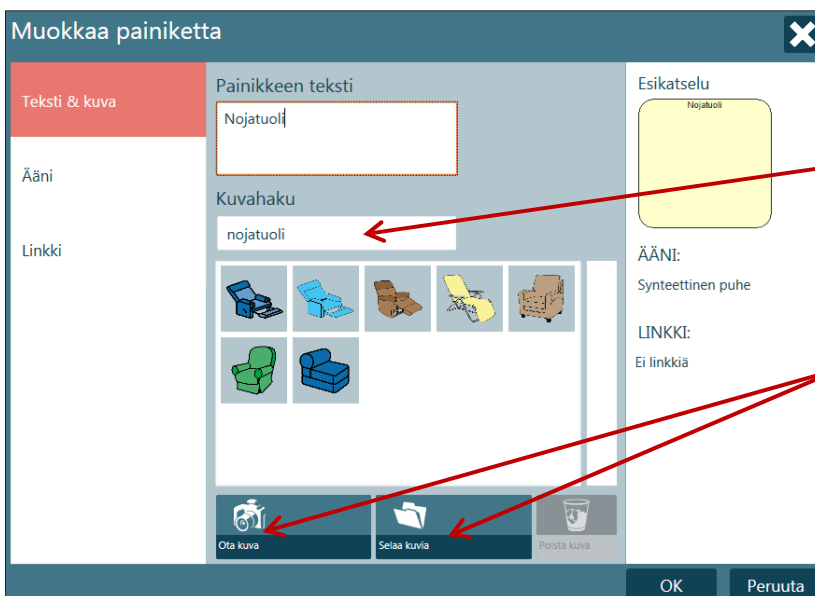


Tällä työkalulla voit tehdä valitsemaasi painikkeeseen halutut muokkaukset.

Teksti & kuva -välilehdellä voit hakea kuvan kirjoittamalla kuvahakuun haluamasi sanan ja valita ehdotetuista kuvista mieleisen. Vaihtoehtoisesti voit hakea kuvan omista kuvatiedostoista tai ottaa valokuvan liitettäväksi painikkeelle.

Muokkaa myös painikkeelle tuleva teksti.

Tällä työkalulla voit myös muokata painikkeen ääneen liittyviä asetuksia **Ääni**-välilehdeltä sekä **Linkki**-välilehdeltä lisätä tai poistaa linkityksiä. (tarkemmat ohjeet löydät Communicator 5:n aloitusoppaasta.)

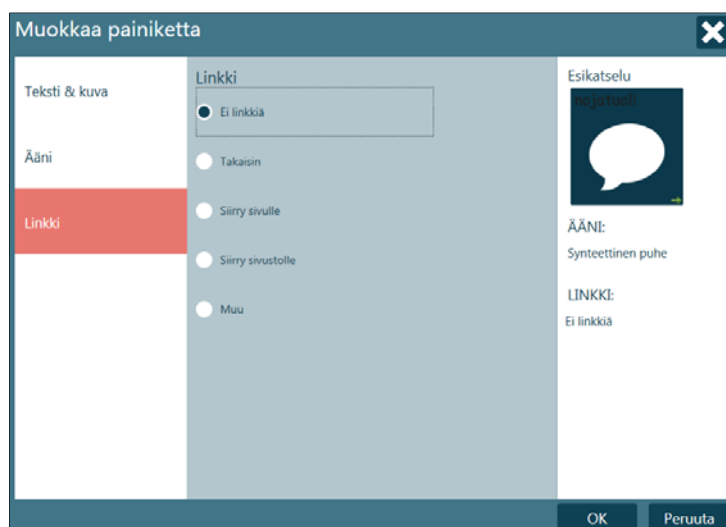


Kun olet tehnyt kaikki tarvittavat muokkaukset, klikkaa ok.



Jotta muokkaukset tallentuisivat, klikkaa vielä hiiren oikeaa ja tallenna.


Valmiiden sivujen päivittäminen muokkaustilassa

Laajemmat muutokset tehdään **muokkaustilassa**. Muokkaustilassa tehdään kaikki tarvittavat muutokset ja ajotilassa voi tarkistaa kuinka tehdyt muutokset toimivat.

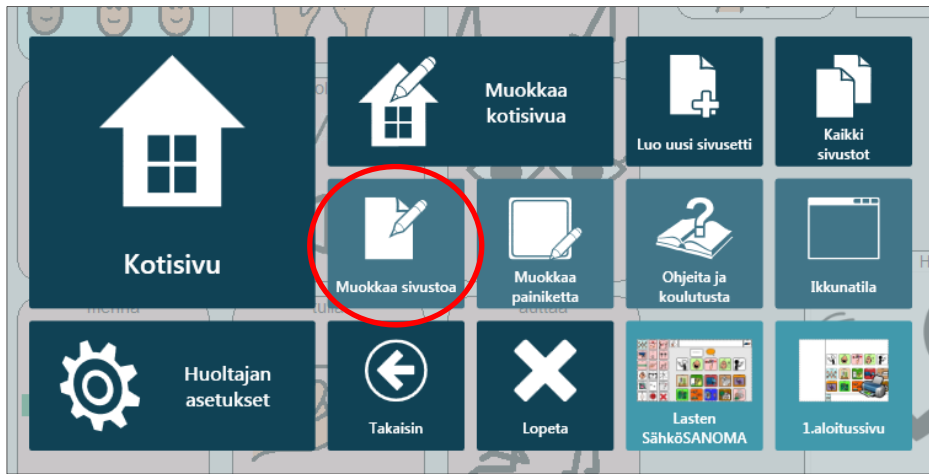

Ollessasi **ajotilassa** avaa sivu, jonne haluat tehdä päivityksiä. Tämän sivun saat muokkaustilaan klikkaamalla **Shift + F5** TAI VAIHTOEHTOISESTI hiiren oikea -> **muokkaa sivustoa**.

Muokkaustilassa oltaessa Communicator 5 ohjelma näyttää sivulistassa kaikki Lasten SähköSANOMAssa olevat sivut. Halutun sivun saa auki klikkaamalla sitä.

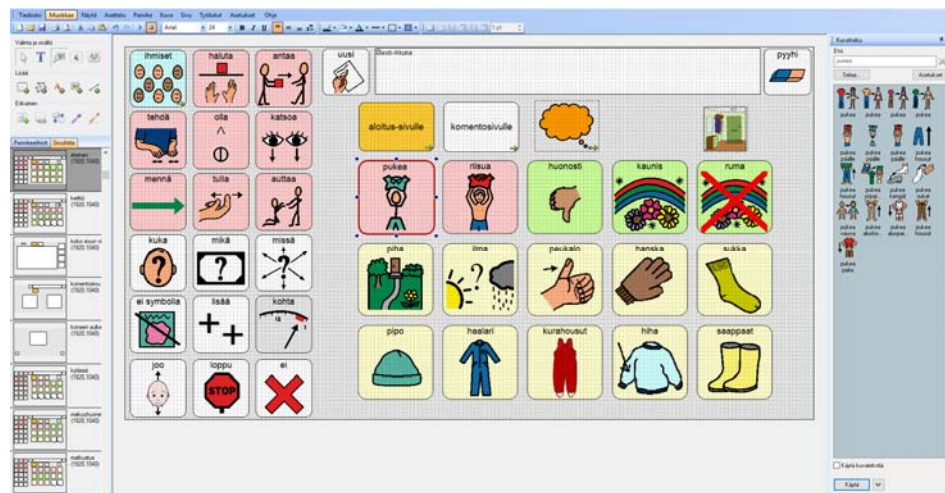


Takaisin ajotilaan päästään klikkaamalla työkaluriviltä **Ajotila**-painiketta.

Myös muistitikulta löytyvään **tulostettavaan kommunikointikansioon** voi tehdä muutoksia Communicator 5 ohjelmassa.

Jos haluat lisätä kansioon vaikkapa valokuvia henkilöistä, ne voi liittää omista kuvatiedostoistasi muistitikulta löytyvään tyhjiin pohjaan, jolloin kuvat tulostuvat oikean kokoisiksi. Vaihtoehtoisesti kuvat voi esimerkiksi tulostaa ja liimata tai liittää kontaktimuovilla kansion ruutuihin.

Kansion muovikierteen voi avata ja sulkea uudelleen, joten kansioon voi lisätä tai poistaa sivuja helposti.

Communicator 5:n muokkaustyökalut

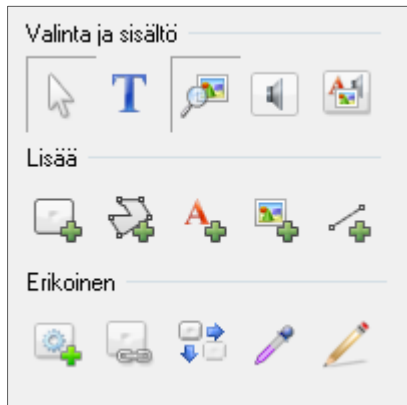


Huom! Ole tarkkana, mikä työkalu milloinkin on aktiivisena. (Aktiivisen työkalun merkinä on alas painettu kuvake.)

Muokattavan painikkeen valitsemiseen tarvitset valintatyökalua.



Uuden kuvan hakeminen

Valitse ensin painike, jota haluat muokata.

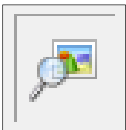



Valitse **Lisää kuva**-työkalu, jolloin oikeaan reunaan aukeaa kuvahaku. Kirjoita haluamasi kuvan hakusana hakukenttään. Jos haet kuvan omalta koneelta esim. kuvatiedostosta, valitse selaa.

Kun olet valinnut haluamasi kuvan, klikkaa alareunasta ruksi kohtaan käytä kuvatekstiä; mikäli haluat ruutuun kuvan lisäksi myös tekstin. Tämän jälkeen klikkaa käytä.



Lisää teksti -työkalulla pääset muokkaamaan painikkeessa olevaa tekstiä. Tekstin paikan ja fonttikoon saa määriteltä työkalurivin painikkeista.

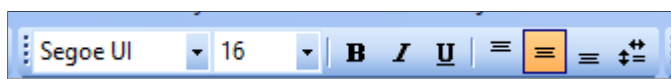

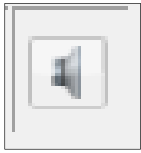

Äänityökalulla pääset muokkaamaan painikkeen ääniasetuksia.

Äänityökalu

Ääni napsautettaessa Kuuluva vihje

Äänityyppi

- ☒ Ei ääntä
- ☐ Synteettinen puhe
- ☐ Nauhoitettu ääni
- ☐ Äänitiedosto: [Selaa...](#)

Teksti puheeksi

- ☒ Puhu teksti painikkeesta
- ☐ Puhu teksti:

Sekalainen

☐ Estä käyttöliittymän käyttö äänen toiston aikana

[Testaa ääntä](#) [Nauhoita ääni](#) [Siirry omiin nauhoitettuihin ääniin...](#)

[Tallenna](#) [Sulje](#)



Jos käytät **Muokkaa painikkeen sisältöä** -työkalua, saat tehtyä kaikki tarvittavat muutokset kerralla.

Kuvahaku

Sisältötyökalu

[<< Ed. painike](#) [Seur. painike >>](#)

Painikkeen teksti:

Kuva

[Kuvahaku](#)


Ääni

- ☐ Ei ääntä
- ☒ Puhu teksti painikkeesta
- ☐ Puhu teksti:


☐ Tallenna ja siirry seuraavaan

[Tallenna](#) [Sulje](#)


Uuden painikkeen (ruudun) luominen

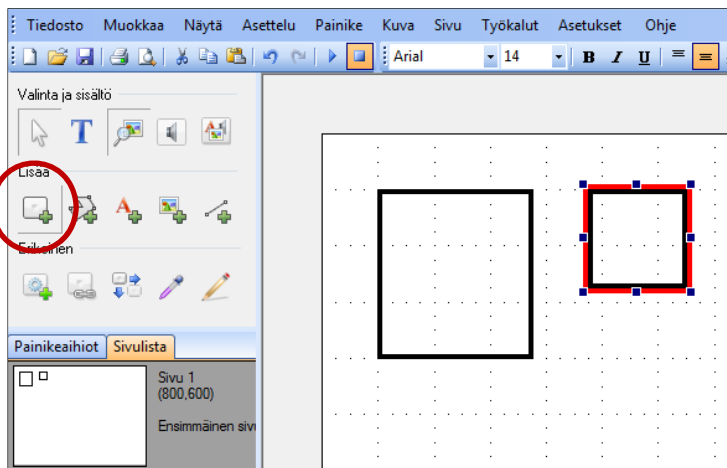

Valitse hiirellä **Painiketyökalu**. Vie hiiren kohdistin haluamaasi paikkaan. Paina hiiren vasen painike pohjaan ja raahaa kursoria haluamaasi suuntaan niin kauan, että saat haluamasi kokoisen painikkeen. Kun painikkeen reunat ovat punaiset, se on aktiivinen ja voit muokata sitä, poistaa sen kokonaan painamalla delete-näppäintä tai siirtää painiketta haluamaasi paikkaan. Painiketta voi myös suurentaa tai pienentää.

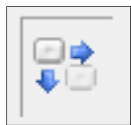

Jos haluat monta samankokoista painiketta, käytä **Toistettuja kohteita -työkalua**. Valitse Toistettuja kohteita -työkalu ja vie hiiren kohdistin tekemäsi painikkeen päälle. Paina hiiren vasen painike pohjaan ja raahaa hiirtä, kunnes sinulla on tarvitsemasi määrä painikkeitä.

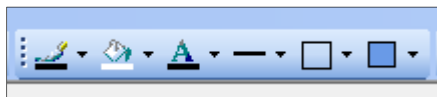

Työkaluriviltä löytyvät painikkeiden muokkaukuvakkeet alasvetovalikkoineen.



Reunan väri kuvakkeesta voit vaihtaa painikkeen reunan väriä.



Taustaväri kuvakkeesta saat vaihdettua painikkeen sekä sivun taustaväriä. Painikkeen ollessa aktiivinen, vaihtuu sen taustaväri, mutta jos mikään painike ei ole aktiivinen, vaihtuu sivun taustaväri.



Tekstin väri kuvakkeesta saat vaihdettua tekstin väriä.



Reunan paksuus kuvakkeesta saat vaihdettua ruudun reunojen paksuutta.




Painikkeen muoto kuvakkeesta saat muunneltua ruudun muotoa.




Painikkeen tehosteet kuvakkeesta saat valittua joko tasaisen tai liukuvärin

Painikkeen (ruutu) tai painikkeiden koon muokkaaminen

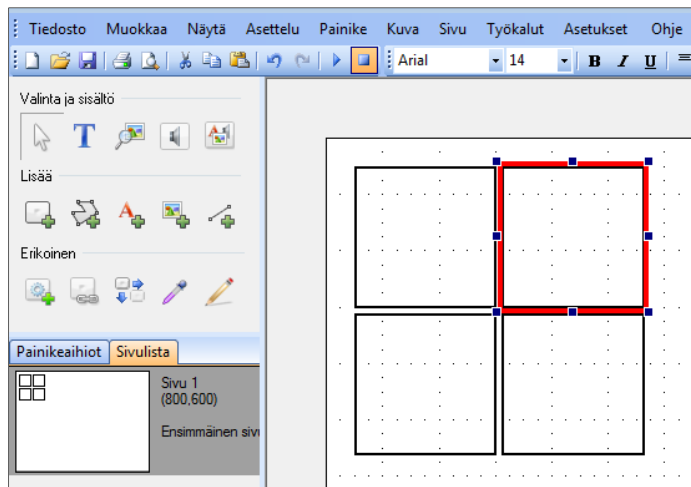

Aktivoi painike, jonka kokoa haluat muokata. Vie hiiren kursori ruudun kulmaan, jolloin ilmestyy kaksipäinen nuoli. Pidä hiiren vasen näppäin alas painettuna ja "venyt" ruutua isommaksi tai pienemmäksi.

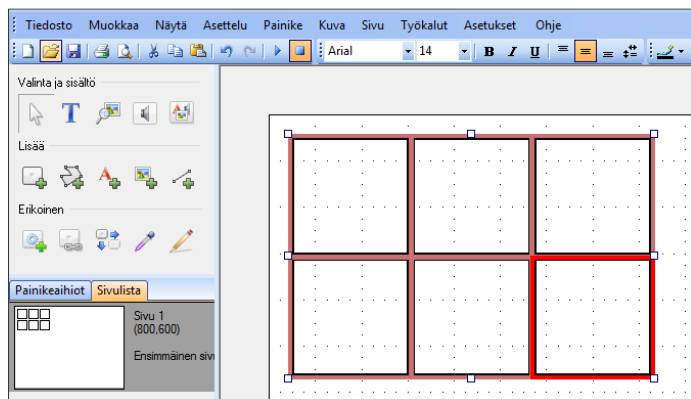


Aktivoi kaikki painikkeet, jotka haluat muokata. Aktivointi tehdään raahaamalla hiirellä niin, että katkoviivoitus ympäröi kaikki halutut painikkeet. Voit suurentaa tai pienentää kaikki aktiivisena olevat painikkeet kerralla viemällä hiiren kursorin ruudukon reunaan tai kulmaan ja raahaamalla hiiren vasen painike alas painettuna.

Pop up ihmiset - sivun päivittäminen

Pop up Ihmiset -sivulla on valmiina painikkeita, joissa lukee ”nimi”.

Käytä näitä painikkeita, kun tekstiksi tulee jokin erisnimi. Tällöin taivutin osaa taivuttaa nimen oikein. Näiden painikkeiden muokkaus on helppo tehdä ajotilassa **Painikkeen muokkaus-työkalulla**. (katso ohje s.8) **Muista lisätä nimen perään välilyönti.**

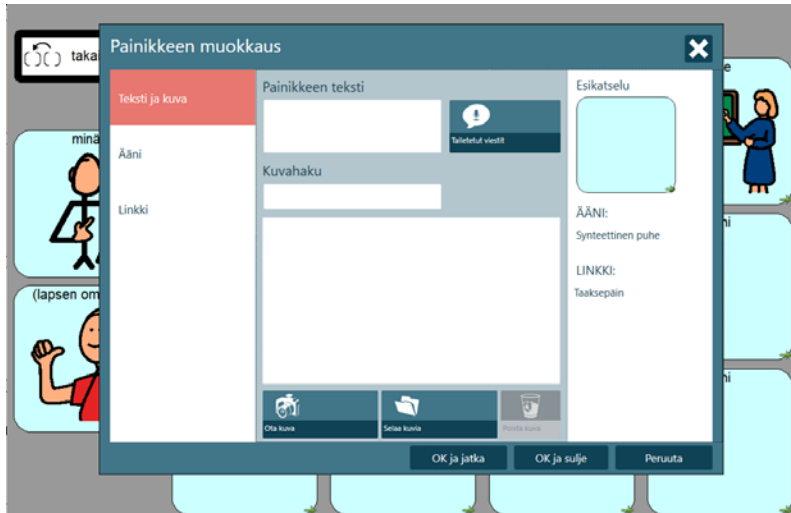


Linkittäminen tai linkityksen vaihtaminen

Kun haluat linkittää painikkeen uuteen sivuun:

1. Aktivoi painike johon haluat lisätä linkin.
2. Klikkaa **Lisää painikkeisiin linkkejä** -painiketta, jolloin oikeaan reunaan aukeaa linkityökalu.
3. Laita ruksi kohtaan **Siirry sivulle** ja valitse luettelosta haluamasi sivu. Jos haluat poistaa linkityksen, laita ruksi kohtaan **Ei linkkiä**.
4. Klikkaa lopuksi tallenna ja sulje.
5. Klikkaa vielä työkaluriviltä tallenna painiketta.

Muista poistaa ylimääräiset komennot!



Ruutu, joka linkittyy uuteen sivuun, ei lähetä kuvaa viestiriville.

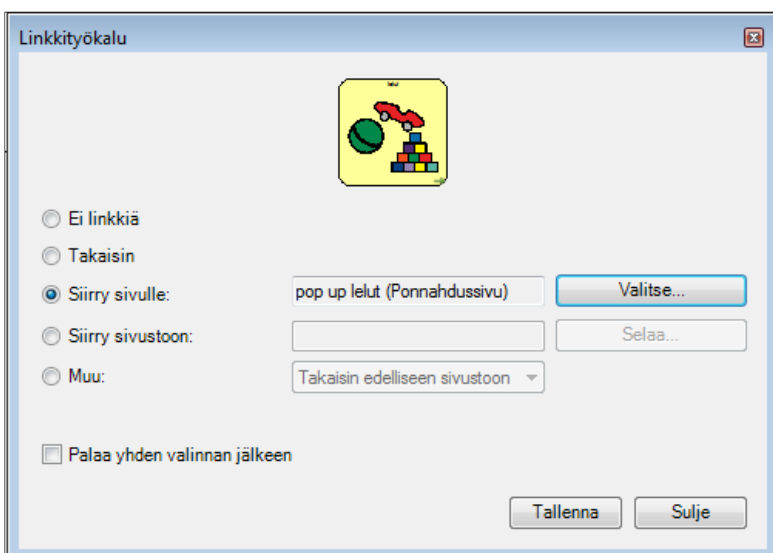

Valmiin viestin tekeminen tai vaihtaminen


Kun haluat tehdä uuden valmiin viestin tai vaihtaa jonkin jo olemassa olevan viestin

1. Klikkaa 2 x Puhekupla-painikkeen päällä -> oikealle avautuu Älypainiketyypit ja toiminnot
2. Klikkaa 2 x kohtaa "Toista ääni"
3. Laita ruksi kohtaan "Puhu teksti" ja kirjoita haluamasi viesti seuraavasti: #, välilyönti, viestisi ja loppuun vielä välilyönti. Älä käytä pistettä äläkä rivinvaihtoa!
4. Klikkaa ok -> tallenna -> sulje.
5. Tallenna vielä työkalurivillä.

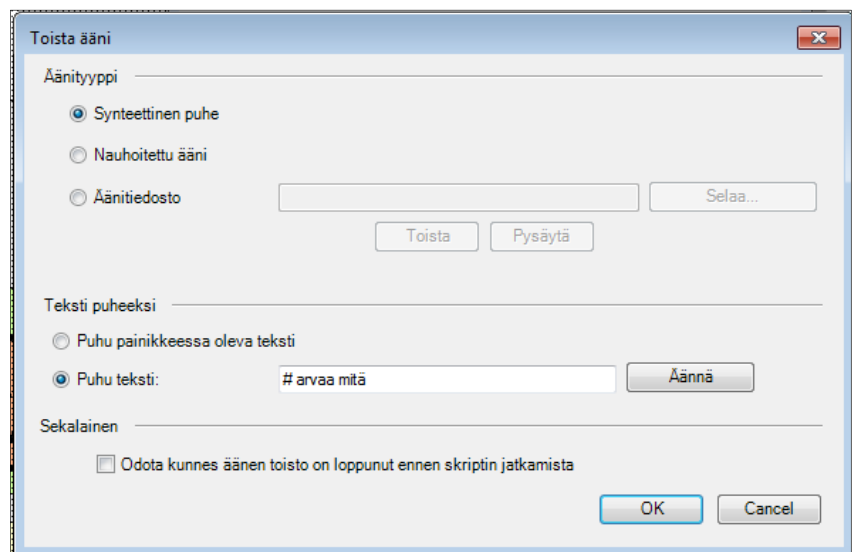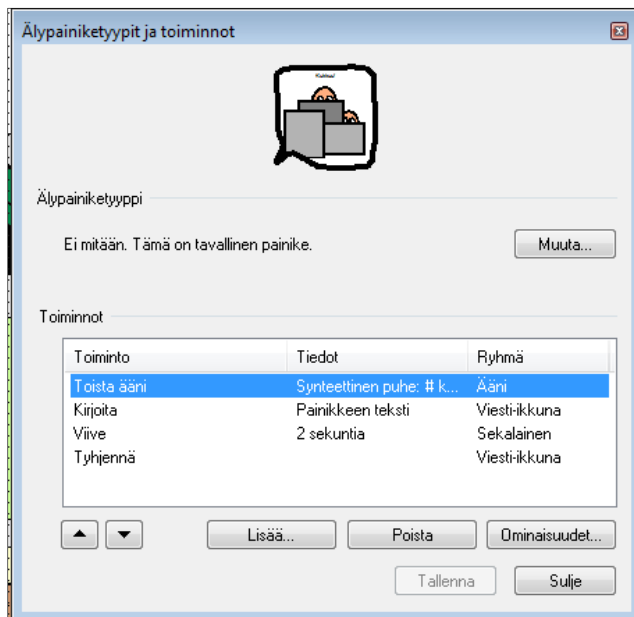

Kun haluat lisätä uuden Puhekupla-painikkeen, kopioi valmiiksi tehty Puhekupla-painike ja muuta siihen viesti. Kirjoita viesti sen mukaan, miltä haluat sen kuulostavan. Vieraskieliset sanat tulee kirjoittaa ääntämistavan mukaan.

Valmiisiin viesteihin on lisätty komento viestin poistamisesta viestiriviltä 1 sekunnin viiveellä. Tämä komento lisätään **painikkeen toiminnot**; välilehdeltä "sekalainen" -> kohta "Toiminnan suorittaminen" -> viive 1s -> ja välilehdeltä "viesti ikkuna" -> kohta "Pyyhi" -> Tyhjennä.


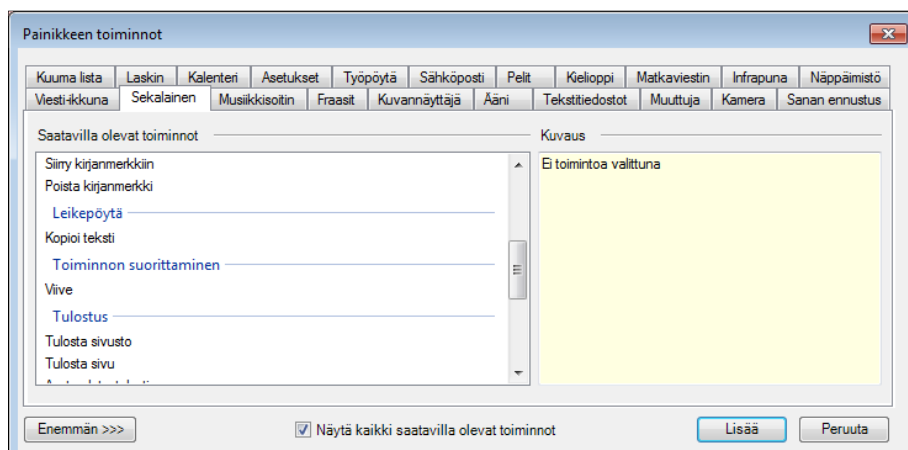


Communicator 5:n asetukset


Asetuksiin pääsee tekemään muutoksia valikkoriviltä: **Asetukset ->**

a) **Syöttötapa** eli mitä hiirtä käytetään

Täältä voit valita eri hiirivaihtoehtojen välillä. Onko käytössä esim. katsehiiri vai kosketus.

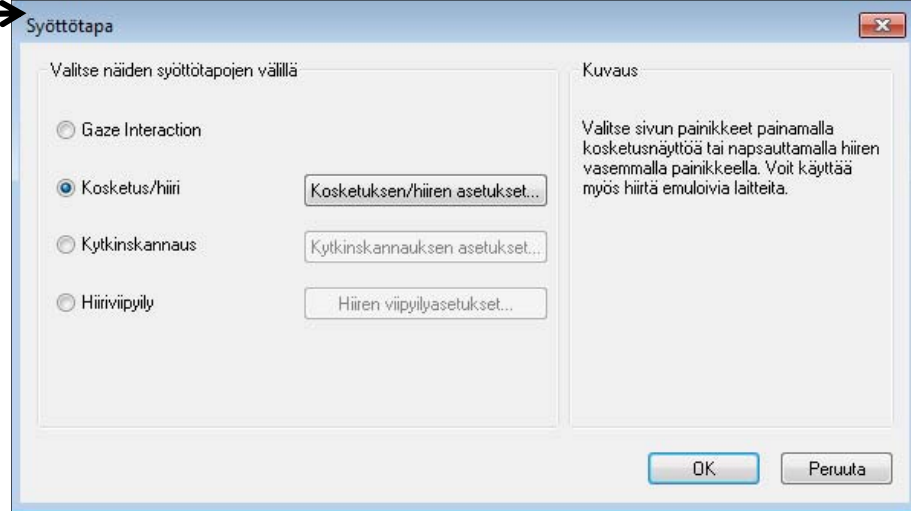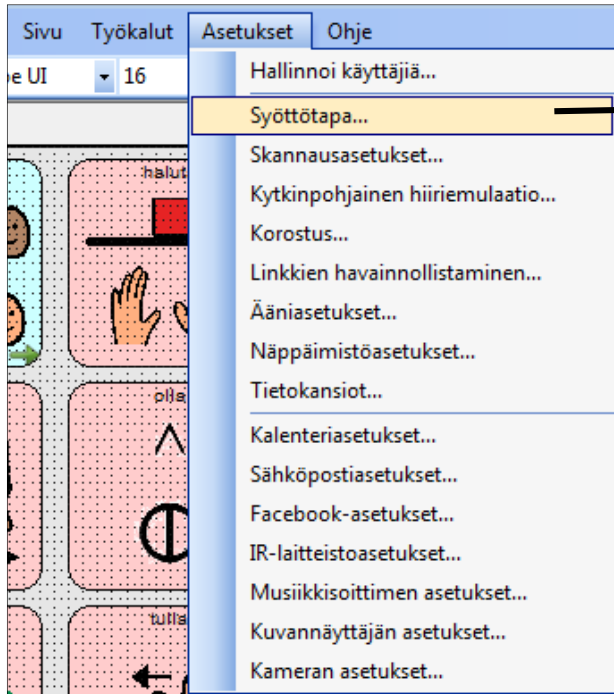


Kosketuksen / hiiren asetuksista voit muuttaa mm. minimiaikaa, jonka painikkeen täytyy olla painettuna ennen kuin se tulee valituksi. Tällä voidaan minimoida vahingossa tehtyjä valintoja. Jos ongelmana on toistuvat valinnat, kannattaa Älä huomioi -viiveen aikaa nostaa.

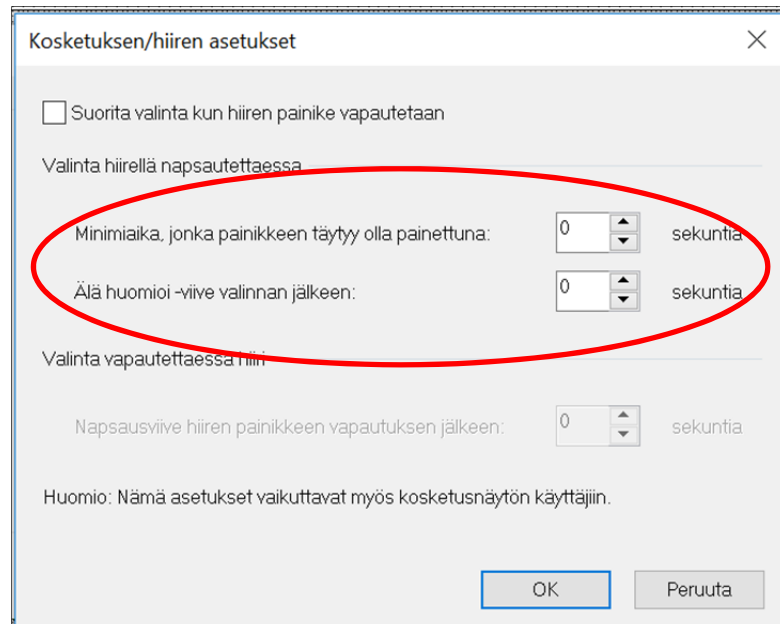

b) Puheäänien valinta


DialoQ taivutinta käytettäessä puheääneksi tulee valita DialoQ taivutin.


Mies- tai naisääni valitaan DialoQ taivuttimen omista asetuksista. (katso s.21)

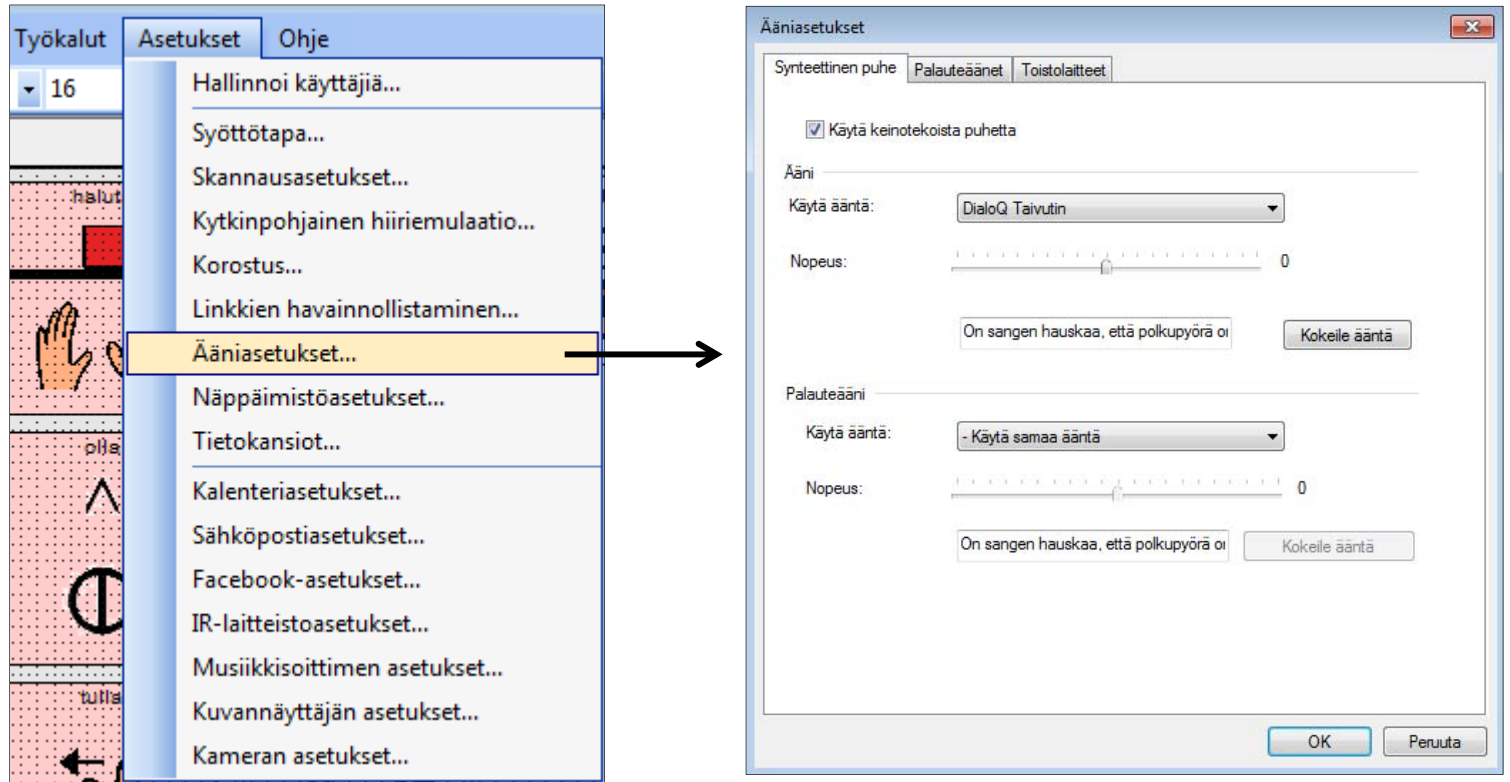

c) Äänen voimakkuuden säätäminen

Äänen voimakkuutta voidaan muuttaa tietokoneen omasta äänen voimakkuuden säätimestä tai SähköSANOMASSA ajotilassa oltaessa klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla **Lisäasetukset -> Ääni-välilehdeltä äänen voimakkuus -> + tai - painikkeista** muuttamalla äänen voimakkuus halutuksi.

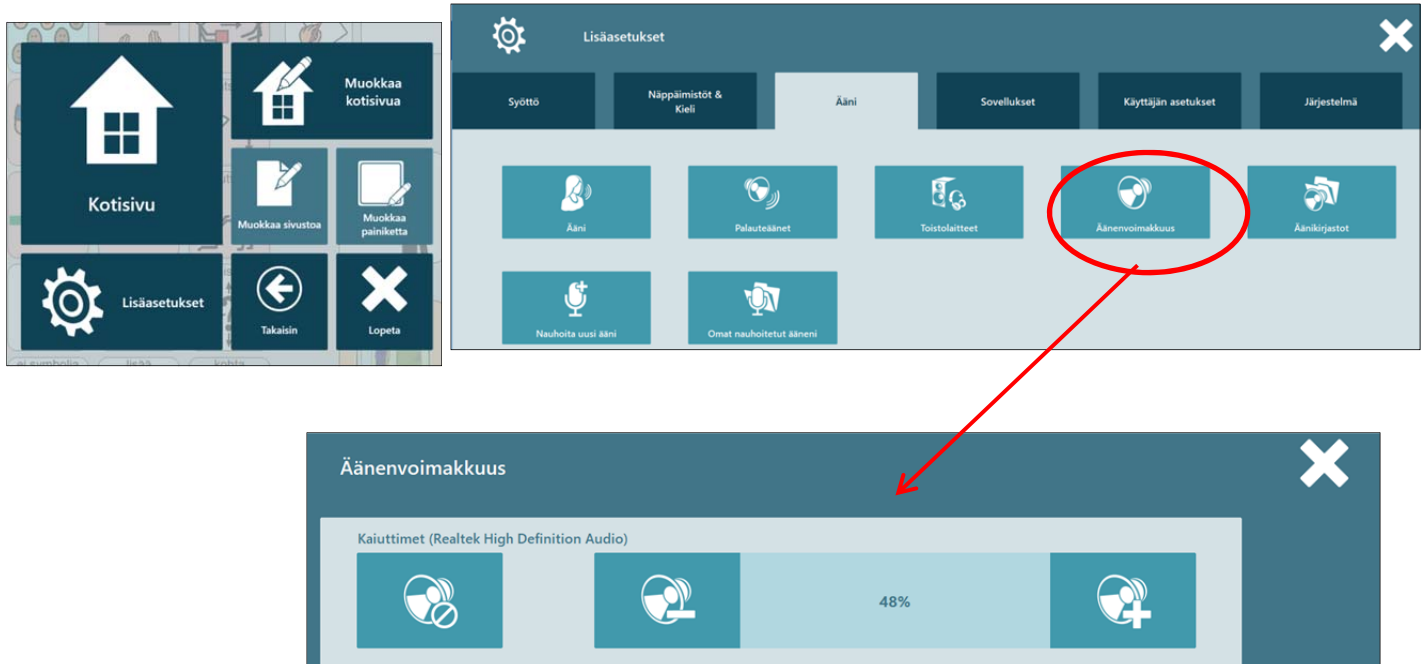

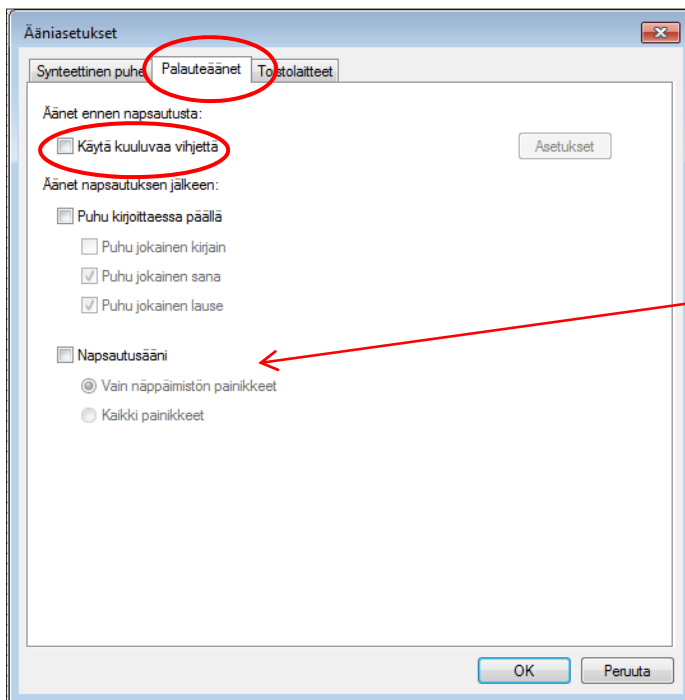


Jos **Vihjeäänet** halutaan päälle, tulee valikkoriviltä asetukset -> ääniasetuksista valita välilehti **Palauteäänet**. Laita ruksi kohtaan "**käytä kuuluvaa vihjetä**". Tällöin ohjelma puhuu jokaisen painikkeen vihjeen aina kursorin ollessa painikkeen päällä.

Tältä välilehdeltä voit halutessasi laittaa päälle myös **napsautusäänen** joko näppäimistöä käytettäessä tai kaikkiin painikkeisiin. Tällöin valinnan yhteydessä tulee "klik"-ääni.

d) Ensimmäinen sivu

Ensimmäinen sivu määrittää mikä sivu aukeaa SähköSANOMAA avattaessa.

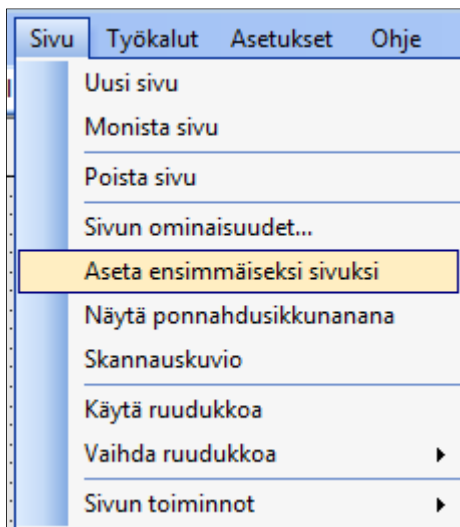

Voit valita ja vaihtaa minkä tahansa sivun ensimmäiseksi sivuksi. Avaa ensin haluttu sivu muokkaustilaan. Tämän jälkeen valitse valikkoriviltä kohta **sivu**.

Aukeavasta valikosta valitse kohta **Aseta ensimmäiseksi sivuksi**. Haluttu sivu siirtyy sivulistan ensimmäiseksi. Muista lopuksi vielä tallentaa valikkoriviltä.

Ohjelmien asentaminen

Toimiakseen tarkoituksen mukaisesti Lasten SähköSANOMA tarvitsee seuraavat ohjelmat:


- Communicator 5 -kommunikointiohjelma
- DialoQ-taivutin

Communicator 5

Asennus

Asenna Tobii Communicator 5 käynnistämällä toimitetulla asennusmedialla oleva SetupCommunicatorSuite.exe sovellus.



Asennuksen kysyessä valitse **Täydellinen asennus**, jotta kaikki tarvittavat ominaisuudet asentuvat koneelle.

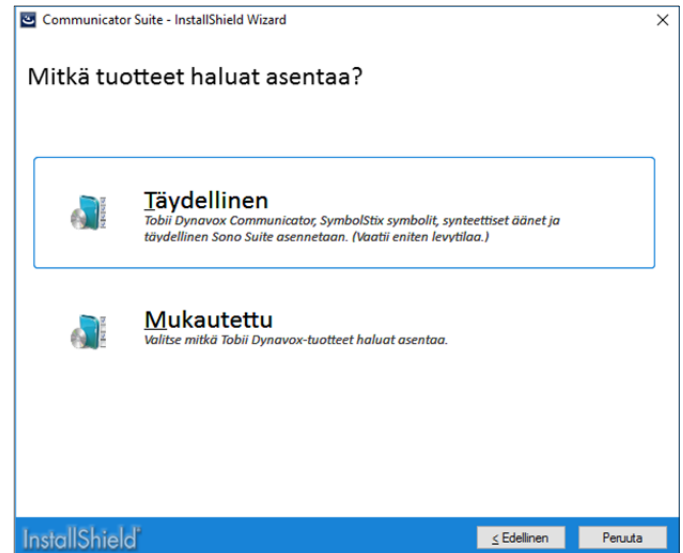

Käyttöönotto

Kun Communicator 5 käynnistetään ensimmäisen kerran, se avaa ohjatun käyttöönoton.

Syötä haluamasi **käyttäjänimi** ja valitse haluamasi puhesynteesi. Mikäli käytät taivutinta käyttävää taulustoa valitse aina DialoQ taivutin. Valitse myös syöttötapa ohjaintavasta riippuen.

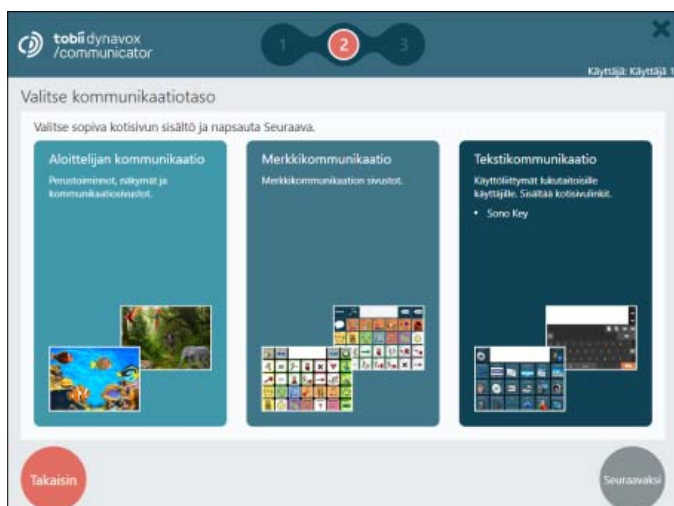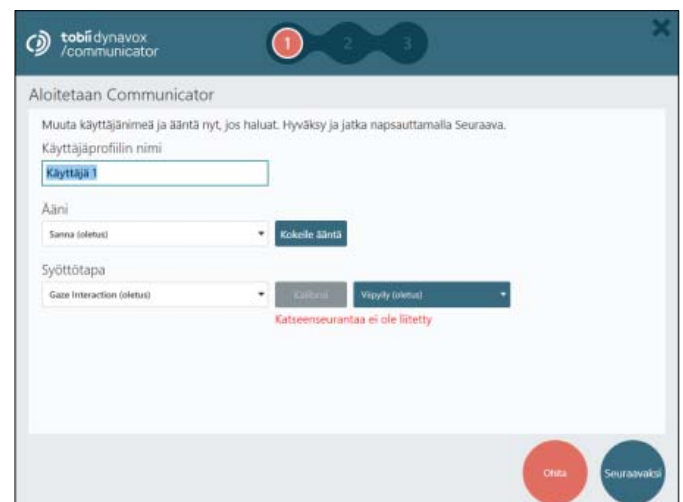

Valitse käyttäjätaso, tämä vaikuttaa mitä sivustoja Communicator 5:n kotisivulla oletuksena näkyy. Tämä ei vaikuta varsinaiseen tauluston käyttöön.


Kun ohjattu asennus on tehty, ohjelma pyytää aktivoimaan lisenssin. Valitse lisenssien hallinta ja syötä lisenssiavain aktivoidaksesi lisenssin.





DialoQ-taivutin

Asennus

Asenna DialoQ-taivutin käynnistämällä asennusmediaalta Setup_DialoQ_Taivutin-X.X.X.exe (numerointi vaihtelee asennustiedoston versiosta riippuen, esim. 1.4.3)

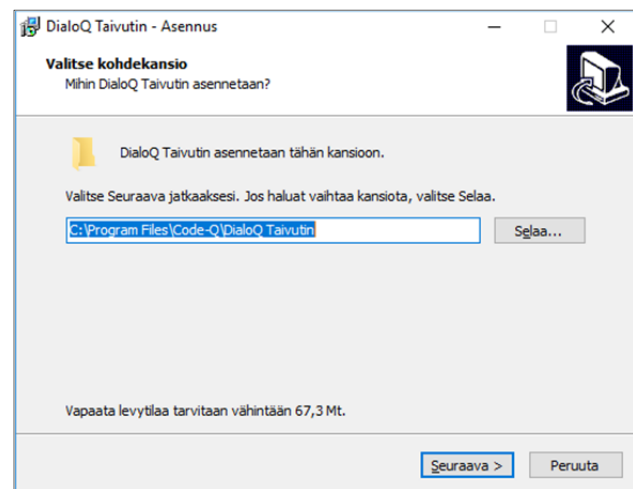


Suorita asennus ruudulla annettujen ohjeiden mukaisesti. Ohjelma asentaa DialoQ-taivuttimen, KobaSpeech puhesynteesiohjelman joko Onni tai Satu-äänellä tai molemmilla mikäli käytössä on kahden äänen lisenssi. Asennusohjelma asentaa myös tarvittaessa Microsoft Visual C++ Runtime -ohjelman, mikäli sitä ei ole koneelle jo asennettuna.

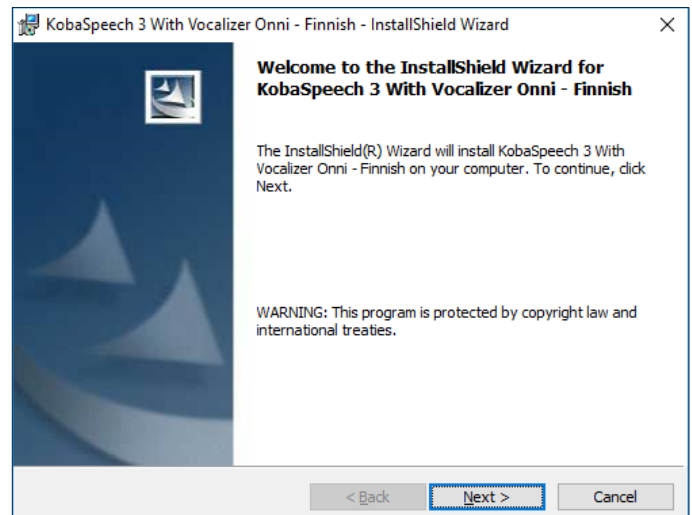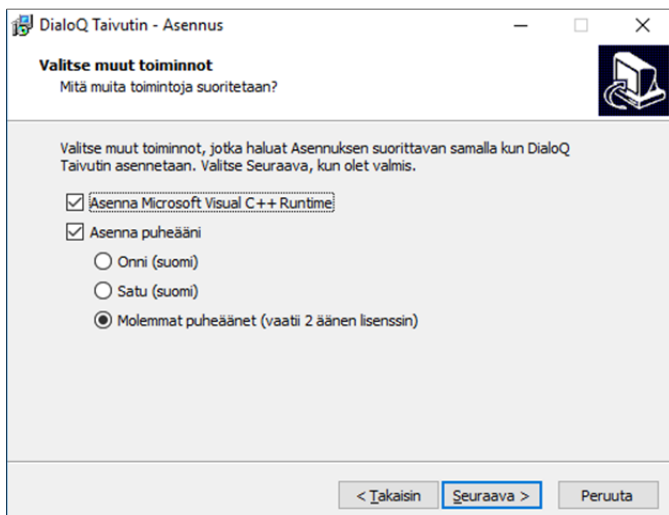


Käyttöönotto

Kun DialoQ-taivutin on asennettu, se pitää aktivoida. Asennusohjelma pyytää käynnistämään lisenssin aktivoinnin asennuksen lopuksi. Se voidaan myös käynnistää manuaalisesti Windowsin Käynnistä-valikosta avaamalla sieltä DialoQ Taivutin ja valitsemalla Lisenssinhallinta. Syötä lisenssiavain avautuvaan ikkunaan ja aktivoi se painamalla Hae lisenssi. Huom! Lisenssin aktivointi vaatii internetyhteyden.

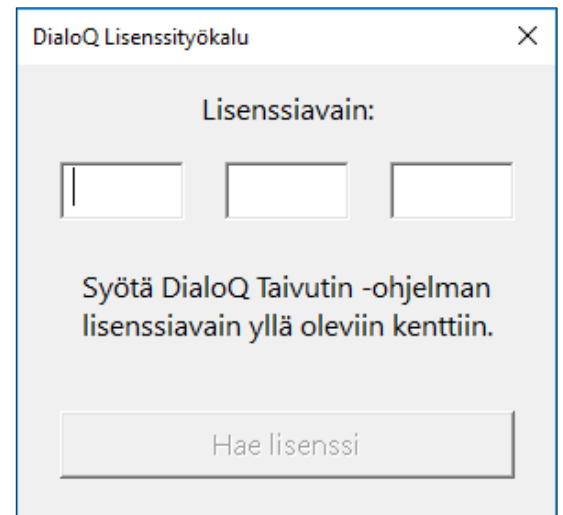

Myös puheääni/äännet pitää aktivoida omalla lisenssiavaimellaan. Avaa Windowsin Käynnistä-valikosta KobaSpeech 3 ja sieltä KobaSpeech Activation -ohjelma


Syötä puheäänien lisenssiavain Serial number -kenttään ja paina Activate Automatically -painiketta jolloin lisenssi aktivoituu.

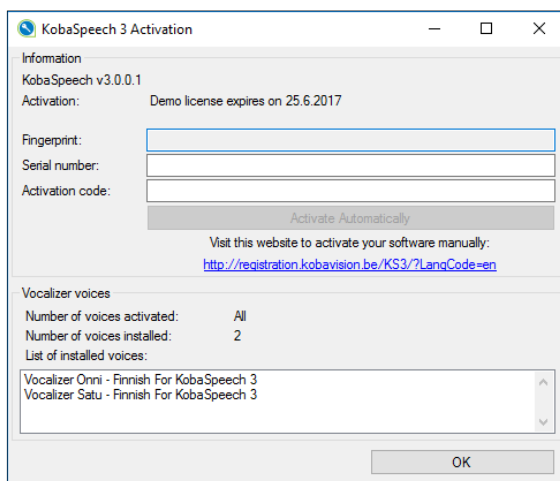


Jos käytössä on kaksi ääntä valitse haluamasi ääni menemällä Windowsin Käynnistä-valikkoon, valitsemalla DialoQ Taivutin ja avaamalla Taivuttimen Asetukset (32-bit). Avautuvasta ikkunasta voit valita joko Onni tai Satu äänen sekä säätää puhesynteesin korkeutta ja nopeutta sekä muutamia muita asetuksia.

Lasten SähköSANOMA -tauluston asentaminen ja käyttöönotto


Vie muistitikulta taulusto (Lasten SähköSANOMA) Communicator 5:n Minun sivustoni -hakemistoon. (Sijainti \Tiedostot\Communicator 5\Käyttäjän nimi\Minun sivustoni\)

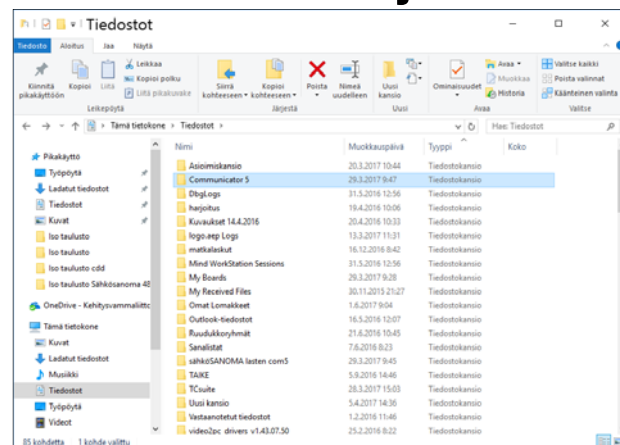


Tauluston asettaminen aloitussivuksi

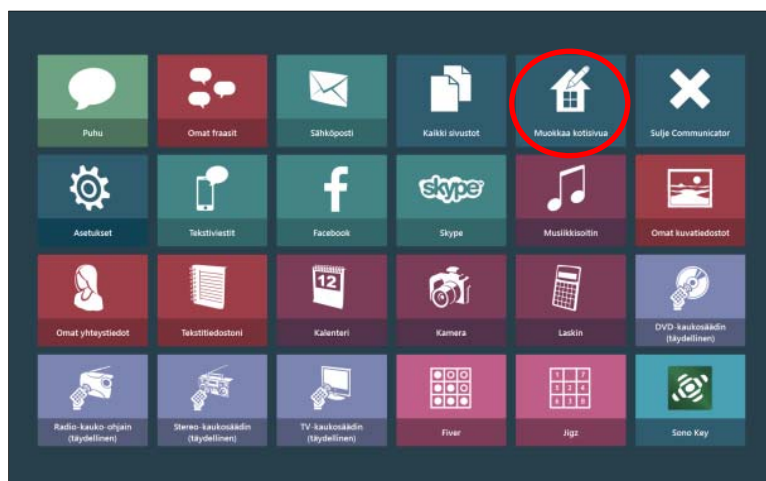

Avaa Communicator 5:n Kotisivu ja valitse Muokkaa kotisivua ja paina Lisää sivustot -painiketta.

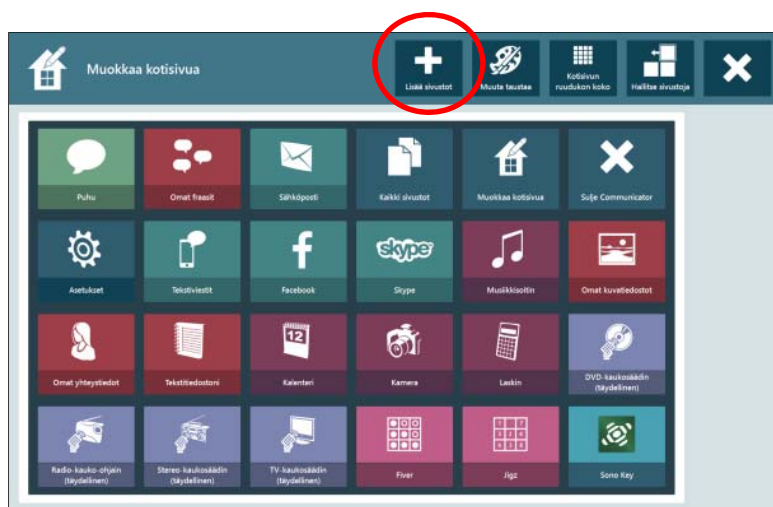


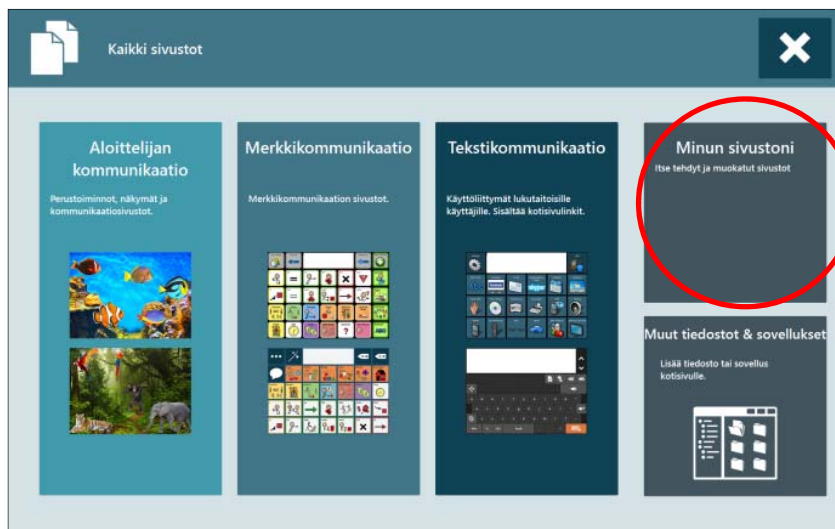

Valitse Minun sivustoni.



Valitse avautuvasta ikkunasta Lasten SähköSANOMA ja klikkaa ylhäältä **Lisää kotisivulle**. Sulje ikkuna ylhäällä olevasta ruksista.

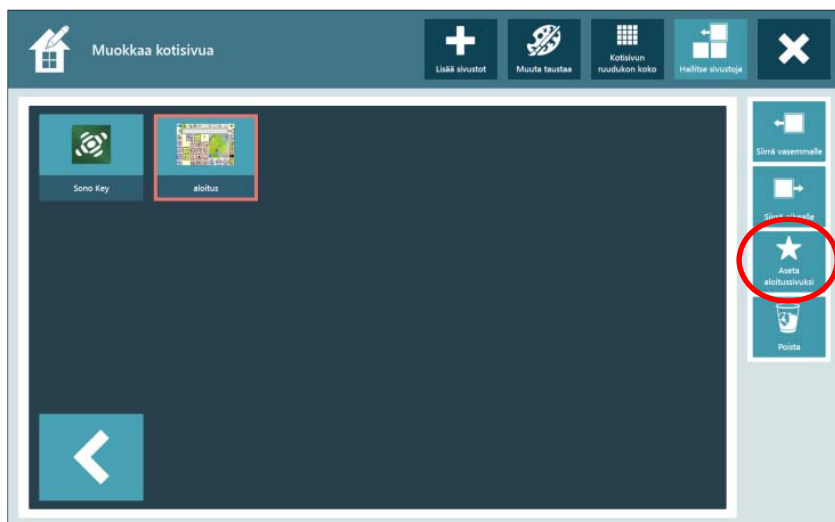

Valitse lisäämäsi sivusto (Lasten SähköSANOMA) ja valitse **Aseta aloitussivuksi** oikealla olevasta valikosta. Varmista valinta. Nyt Communicator 5 avautuu automaattisesti valittuun taulustoon aina avattaessa.

*Kirjaa tälle aukeamalle, mitä muokkauksia teet
Lasten SähköSANOMAAN:*

Tikoteekin tietokoneella ja tabletilla toimivat kommunikointitaulustot Windows-käyttöjärjestelmässä:

- **Lasten SähköSANOMA**
- **SähköSANOMA**
- **TAIKE**

Taulustot ovat saatavilla sekä Communicator 5- että Speaking Dynamically Pro -ohjelmille.



Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki

Kehitysvammaliitto ry

Viljatie 4 B, 00700 Helsinki, puh. 09-34809370

tikoteekki@kvl.fi, www.tikoteekki.fi